

# GEBRAUCHSANWEISUNG



## BEFESTIGUNG PORZELLAN




BESTIMMEN SIE DIE RICHTIGE POSITION FÜR LHR **P-GUARD**®. REINIGEN SIE DIE STELLE GRÜNDLICH MIT DEM ALKOHOLGETRANKTEN TUCH. HALTER VOM **P-GUARD**® ABNEHMEN. SCHUTZPAPIER VOM HALTER ABZIEHEN. HALTER AM PORZELLAN FESTKLEBEN. WARTEZEIT 72 STUNDEN.

**IN PORZELLAN DARF NICHT GESCHRAUBT ODERGEBOHRT WERDEN.**

DAS **P-GUARD**® WIEDER AM HALTER ANBRINGEN.

## BEFESTIGUNG SERENITY TOILETTENSITZERHÖHUNG

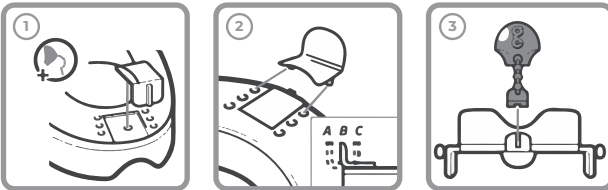

## BEFESTIGUNG AN ANDERE TOILETTENSITZERHÖHUNGEN

1. HALTER AM ERHÖHTEN TOILETTENSITZ FESTKLEBEN.
2. NACH WUNSCH MIT 2 ODER 4 SCHRAUBEN BEFESTIGEN. SCHRAUBEN DURCH DIE ANGEDEUTETEN LÖCHER SCHIEBEN.
3. DAS **P-GUARD**® WIEDER AM HALTER ANBRINGEN.



DAS **P-GUARD**® KANN MIT DER GLIEDERKETTE ZUM GEBRAUCH EINGESETZT WERDEN.



DAS **P-GUARD**® ANN ZUM SAUBERN LEICHT VOM HALTER ABGENOMMEN WERDEN.



PH 5 - 9

MIT NORMALEM HAUSHALTSREINIGER ODER MIT DESINFIZIATIONSMITTEL SAUBERN.



# DERBY P-GUARD®

Welcome to your new Gordon Ellis product.  
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



**SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS**  
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES: **EN FR DE**



**EN** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW

**FR** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS

**DE** JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTADATEN UNTEN

Your **DERBY P-GUARD**® was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



DESIGNED  
IN THE UK



**GORDON ELLIS & CO.**  
TRENT LANE  
CASTLE DONINGTON  
DERBY, ENGLAND DE74 2AT

EC REP

MADE IN CHINA

**AUTHORISED REPRESENTATIVE**  
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE,  
2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR  
4013 MALTA



MD

IFU-REF | 60341/1020-1

PART REF | 60341

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT  
[GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK](http://GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK)

[f gordonellis.healthcare](https://www.gordonellis.healthcare)  
[@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)



VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT  
[GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK](http://GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK)

[f gordonellis.healthcare](https://www.gordonellis.healthcare)  
[@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)



## INSTRUCTIONS FOR USE



### FIXING TO PORCELAIN




LOCATE DESIRED POSITION FOR THE **P-GUARD**<sup>®</sup>. THOROUGHLY CLEAN AREA WITH ALCOHOL WIPE. DETACH FIXING PLATE FROM **P-GUARD**<sup>®</sup>. REMOVE PAPER FROM ADHESIVE PAD ON THE FIXING PLATE. STICK FIXING PLATE TO PORCELAIN, WAIT 72 HOURS.

**DO NOT ATTEMPT TO SCREW OR DRILL INTO PORCELAIN.**

RE-ATTACH **P-GUARD**<sup>®</sup> TO FIXING PLATE.

### FIXING TO SERENITY RAISED TOILET SEAT

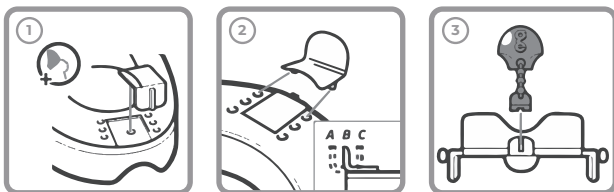

### FIXING TO OTHER RAISED TOILET SEATS

1. STICK FIXING PLATE TO RAISED TOILET SEAT.
2. SECURE WITH 2 OR 4 SCREWS AS DESIRED. PUSH SCREWS THROUGH BLANKED OFF HOLES.
3. RE-ATTACH **P-GUARD**<sup>®</sup> TO FIXING PLATE.



**P-GUARD**<sup>®</sup> CAN BE POSITIONED FOR EACH USE USING THE FLEXIBLE LINKS



**P-GUARD**<sup>®</sup> CAN BE REMOVED FROM ITS FIXING PLATE FOR EASE OF ACCESS AND FOR CLEANING.



PH 5 - 9

CLEAN WITH NORMAL HOUSEHOLD CLEANER OR DISINFECTANT.

## MODE D'EMPLOI



### FIXATION À LA PORCELAINE




LOCALISEZ LE BON EMPLACEMENT POUR LE **P-GUARD**<sup>®</sup>. NETTOYEZ CONSCIENCIEUSEMENT LA ZONE EN QUESTION AVEC UN TAMPON D'ALCOOL. DÉTACHEZ LA PLAQUE DE FIXATION DU **P-GUARD**<sup>®</sup>. RETIREZ LE PAPIER DU COUSSINET ADHÉSIF SUR LA PLAQUE DE FIXATION. COLLEZ LA PLAQUE DE FIXATION À LA PORCELAINE. ATTENDEZ 72 HEURES.

**N'ESSAYEZ PAS DE VISSER DANS LA PORCELAINE NI D'UTILISER DE PERCEUSE.**

RATTACHEZ LE **P-GUARD**<sup>®</sup> À LA PLAQUE DE FIXATION.

### FIXATION DE SERENITY SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ

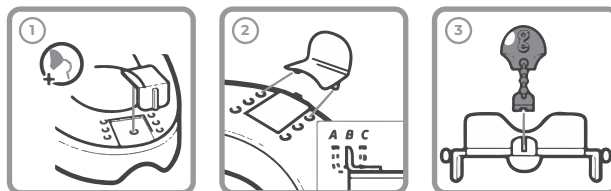

### FIXATION SUR LES AUTRES SIÈGES DE TOILETTE SURÉLEVÉ

1. CALLEZ LA PLAQUE DE FIXATION AU SIÈGE DES TOILETTES LÈVE.
2. SOLIDIFIEZ AU MOYEN DE 2 OU 4 VIS SUIVANT LES BESOINS ENFONCEZ LES VIS DANS LES TROUS PRÉVUS À CET EFFET.
3. RATTACHEZ LE **P-GUARD**<sup>®</sup> À LA PLAQUE DE FIXATION.



LE **P-GUARD**<sup>®</sup> PEUT ÊTRE POSITIONNÉ POUR CHAQUE UTILISATION EN UTILISANT LES MAILLONS FLEXIBLES.



LE **P-GUARD**<sup>®</sup> PEUT ÊTRE RETIRÉ DE SA PLAQUE DE FIXATION POUR FACILITER L'ACCÈS ET POUR LE NETTOYAGE.



PH 5 - 9

NETTOYEZ AVEC UN PRODUIT DE NETTOYAGE OU DESINFECTANT DOMESTIQUE NORMAL.