



# GRIP ON RAISERS

## K100 K200 K300

Welcome to your new Gordon Ellis product.  
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



**EN** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE EC REP (EU CUSTOMERS) OR THE MANUFACTURER (UK & NON-EU CUSTOMERS) - CONTACT DETAILS OVER LEAF

**DK** ENHVER ALVORLIG ULYKKE, DER OPSTÅR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC REP KONTAKTOPLYSNINGER OVER BLADET



**SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS**  
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:

EN DK



MAX  
500 Kg  
1100 lbs



**MAXIMUM USER WEIGHT**  
PER SET OF FOUR



**MAKSIMAL BRUGERVÆGT**  
PR. SÆT PÅ FIRE

Your **GRIP ON RAISERS** were specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



### K100

MINIMUM LEG DIAMETER: 1.9 CM  
MAXIMUM LEG DIAMETER: 3.2 CM



### K200

MINIMUM LEG DIAMETER: 3.2 CM  
MAXIMUM LEG DIAMETER: 4.5 CM



### K300

MINIMUM LEG DIAMETER: 4.3 CM  
MAXIMUM LEG DIAMETER: 5.8 CM



INSPIRED BY YOUR NEEDS



**GORDON ELLIS & CO.**  
TRENT LANE  
CASTLE DONINGTON  
DERBY. ENGLAND DE74 2AT



**AUTHORISED REPRESENTATIVE**  
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND  
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013  
MALTA



MD

IFU-REF LP/K100/1220-2

PART REF LP/K100 + LP/K200 + LP/K300

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT  
[GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK](http://GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK)

[gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)  
 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)








# INSTRUCTIONS FOR USE

# BRUGSANVISNING

- I EN** GRIP-ON RAISERS ARE VERY VERSATILE, BEING USED TO RAISE CHAIRS, BEDS AND TABLES USING A UNIQUE "DOUGHNUT" RING. THIS GRIPS FIRMLY ON TO LEGS OR CASTORS PROVIDING A SOLID STABLE SUPPORT WITHOUT DAMAGING FURNITURE. THE LARGE K300 GRIP-ON RAISER CAN ACCOMMODATE THE LARGEST CASTORS, GRIPPING THEM VERY TIGHTLY AND SECURELY. THE K100 GRIP-ON RAISERS WORK EQUALLY WELL WITH THE SMALL ONE INCH SIZE CASTORS FOUND ON MOST DIVAN BEDS.
1. GRIP ON RAISERS ARE SUPPLIED FULLY ASSEMBLED TO GIVE A 7.5 CM. RASIE SPECIFIC HEIGHT ADJUSTMENT CAN BE SET BY REMOVING ONE OR BOTH OF THE 2.5 CM BASE SECTIONS. THE HEIGHT MUST BE EQUAL FOR ALL LEGS BEING RAISED.
  2. ENSURE THE CORRECT SIZE RAISER IS BEING USED FOR THE FURNITURE LEG/ CASTOR BEING RAISED. A TIGHT GRIP MUST BE OBTAINED. REFER TO THE DIMENSIONS AND SIZE GUIDE BELOW.
  3. PLACE GRIP ON RAISERS UNDER ALL LEGS OF THE FURNITURE BEING RAISED.
  4. LEGS/ CASTORS MUST REST ON THE INTERNAL BASE OF THE GRIP. PRESS DOWN ON THE FURNITURE TO LOCK THE GRIP ON RAISER IN PLACE.
  5. CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE.
- IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/ OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS. DESIGNED FOR STATIC USE ONLY. TAKE CARE TO AVOID SUDDEN OR UNDUE MOVEMENT WHEN USING THIS EQUIPMENT. TAKE CARE LIFTING HEAVY FURNITURE WHEN FITTING THE GRIP ON RAISER. ONCE FITTED, AVOID MOVING THE FURNITURE. DO NOT USE ON UNEVEN SURFACES. GRIP ON RAISERS ARE NOT RECOMMENDED FOR LONG LEGGED CHAIRS.

- DK** GRIP-ON RAISERS ER MEGET ALSIDIGE OG BRUGES TIL AT HÆVE STOLE, SENGE OG BORDE VED HJÆLP AF EN UNIK "DONUT" RING. DETTE GRIBER GODT FAST PÅ BEN ELLER HJUL, HVILKET GIVER EN SOLID STABIL STØTTE UDEN AT BESKADIGE MØBLER. DEN STORE K300 GRIP-ON RAISER KAN RUMME DE STØRSTE HJUL OG GRIBER DEM MEGET TÆT OG SIKKERT. K100 GRIP-ON RAISERS FUNGERER LIGE SÅ GODT MED DE SMÅ HJUL PÅ EN TOMME, DER FINDES PÅ DE FLESTE DIVANSENGE.
1. GREB PÅ RAISERS LEVERES FULDT SAMLET FOR AT GIVE EN 7,5 CM. RASIE-SPECIFIK HØJDEJUSTERING KAN INDSTILLES VED AT FJERNE EN ELLER BEGGE BASESEKTIONER PÅ 2,5 CM. HØJDEN SKAL VÆRE LIG FOR ALLE BEN, DER HÆVES.
  2. SØRG FOR, AT DEN KORREKTE STØRRELSE HÆVES, NÅR MØBELBENET / HJULET HÆVES. ET TÆT GREB SKAL OPNÅS. HENVIS TIL DIMENSIONER OG STØRRELSESVÆJLEDNING UNDER.
  3. PLACER GREB PÅ RAISERE UNDER ALLE BEN PÅ MØBLERNE, DER HÆVES.
  4. BEN / HJUL SKAL HVILE PÅ GREBETS INDVENDIGE BUND. TRYK MØBLERNE NED FOR AT LÅSE GREBET PÅ HÆVER PÅ PLADS.
  5. KONTROLLER FOR STABILITET INDEN HVER BRUG.

DET ER BRUGERENS / EJERENS ANSVAR AT FORETAGE EN INDLEDENDE OG REGELMÆSSIG LOKAL RISIKOVURDERING. KUN DESIGNET TIL STATISK BRUG. SØRG FOR AT UNDGÅ PLUDSELIG ELLER UNØDIG BEVÆGELSE, NÅR DU BRUGER DETTE Udstyr. PAS PÅ AT LØFTE TUNGE MØBLER, NÅR DU MONTERER GREBET PÅ LØFTEREN. NÅR MONTERET, UNDGÅ AT FLYTTE MØBLERNE. BRUG IKKE PÅ UJÆVNEDE OVERFLADER. GRIP PÅ RAISERS ANBEFALES IKKE TIL STOLE MED LANGE BEN.

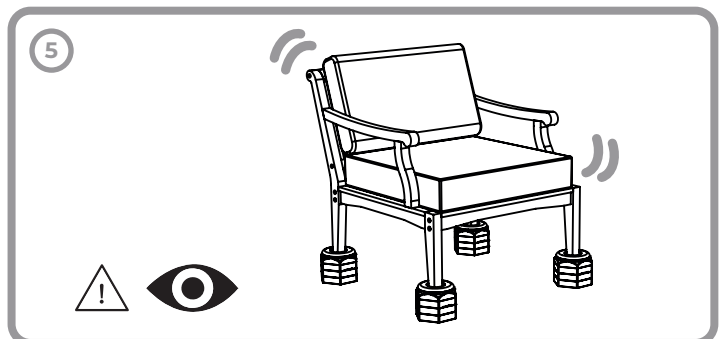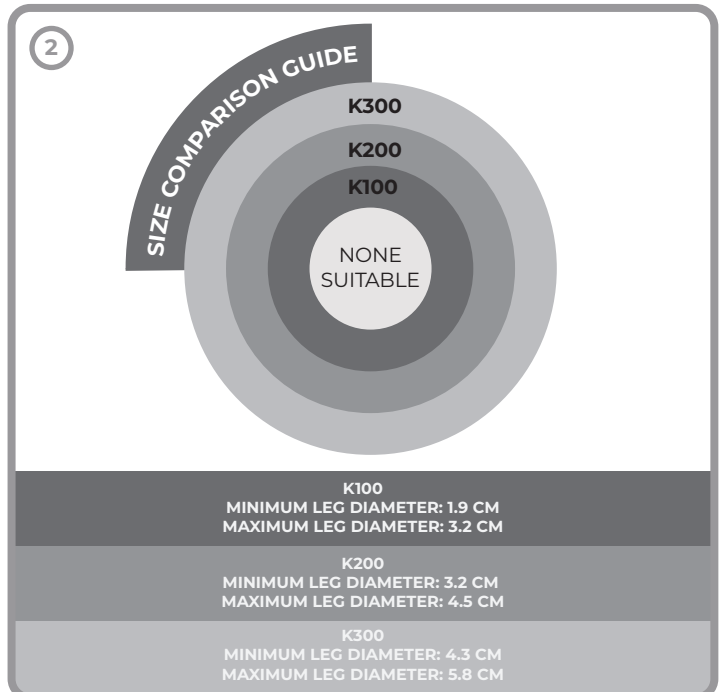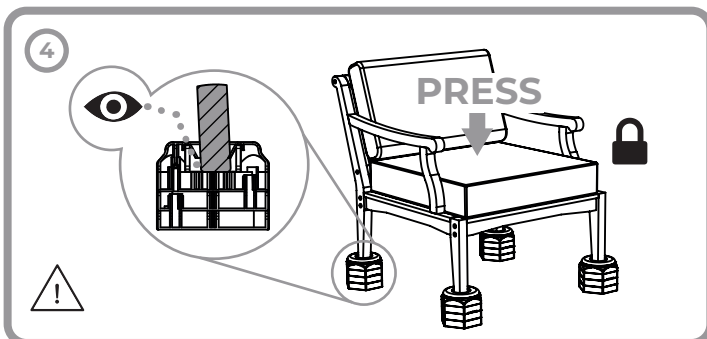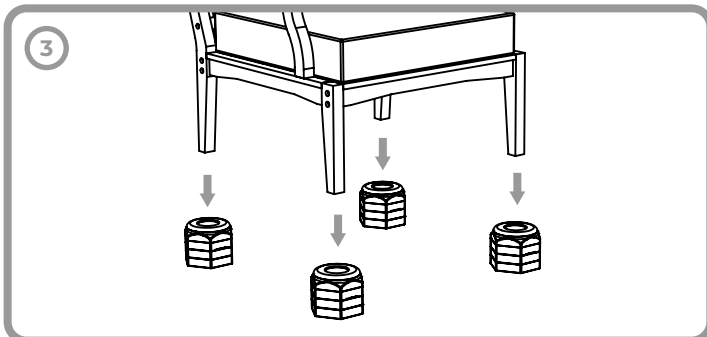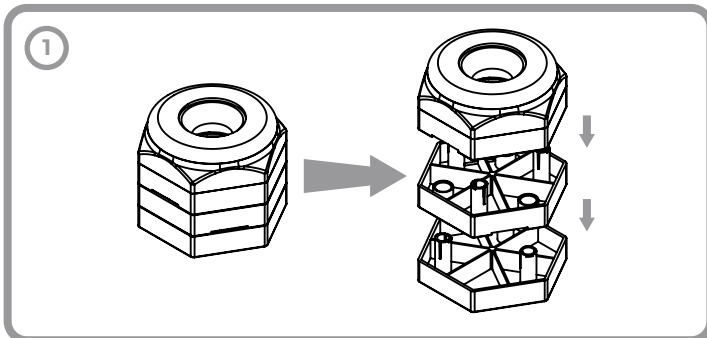

## **I** CLEANING INSTRUCTIONS

WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER  
AFTØRRERES MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND



PH 5 - 9

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT  
**GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK**

[gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)  
 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)

