



GORDON
ELLIS
& CO

PRIMA[®] HOME STEP


5 INCH STEP WITH ADJUSTABLE HANDLE

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.


Your **PRIMA HOME STEP** was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. With the aim of making daily living that little bit easier.



62930
PRIMA HOME STEP
+ HANDLE

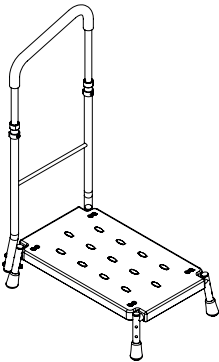

62935
PRIMA HOME STEP
HANDLE

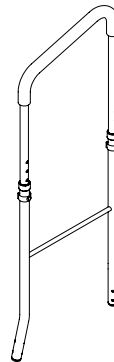

DESIGNED
IN THE UK



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT



AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013
MALTA



MD

IFU-REF 62930/1224-1

PART REF

62930 + 62935

MADE IN CHINA

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK


gordonellis.healthcare



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Ai STEP WITH ONE HANDLE - 62930

BOX CONTENTS

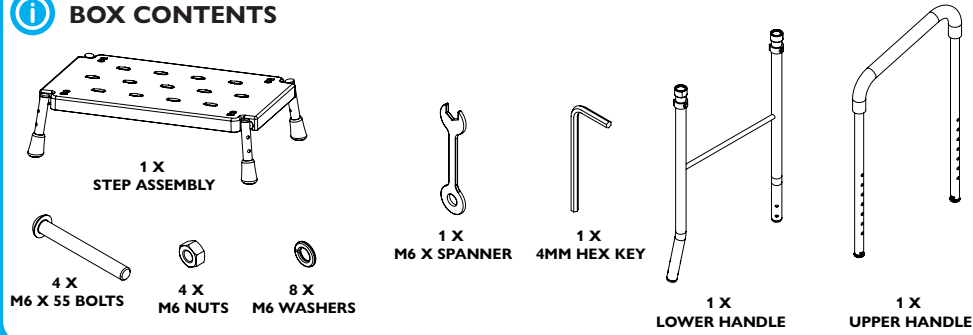


Bi HANDLE PACK (PURCHASED SEPARATELY) - 62935 REQUIRED FOR TWO HANDLE USE


BOX CONTENTS

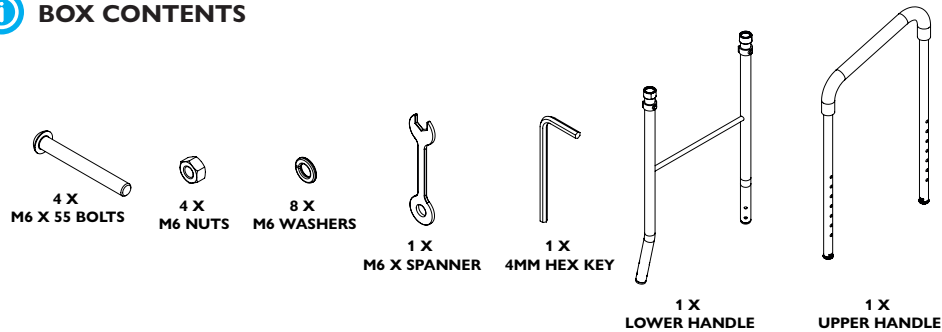

! ALWAYS CHECK STABILITY BEFORE USE

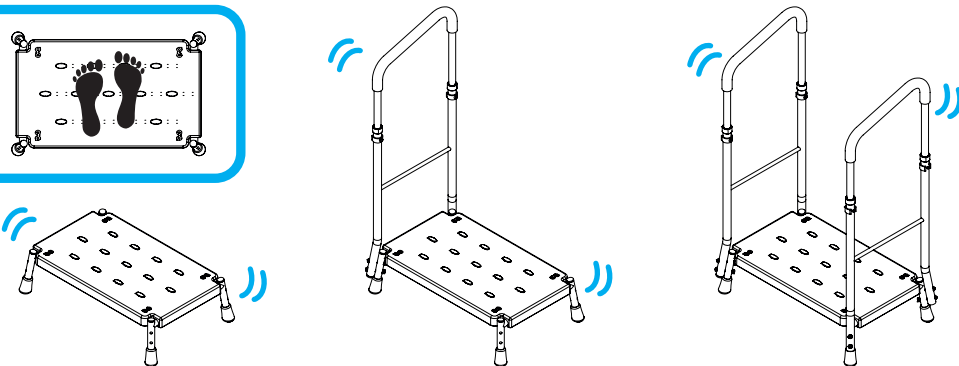

FITTING THE HANDLE

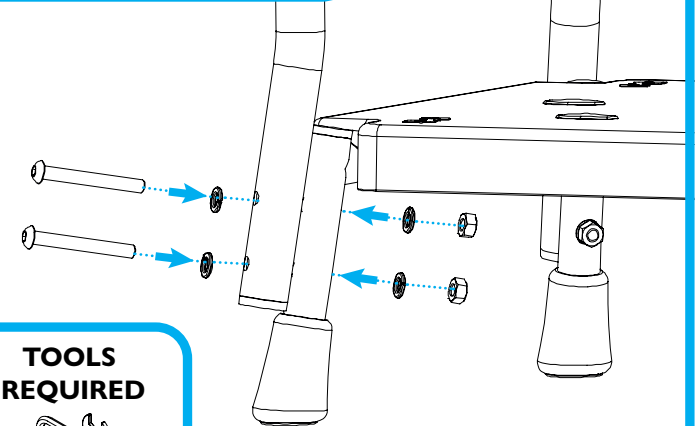


TOOLS REQUIRED



REPEAT FOR ALL NECESSARY SIDES

ADJUSTING THE HANDLE HEIGHT

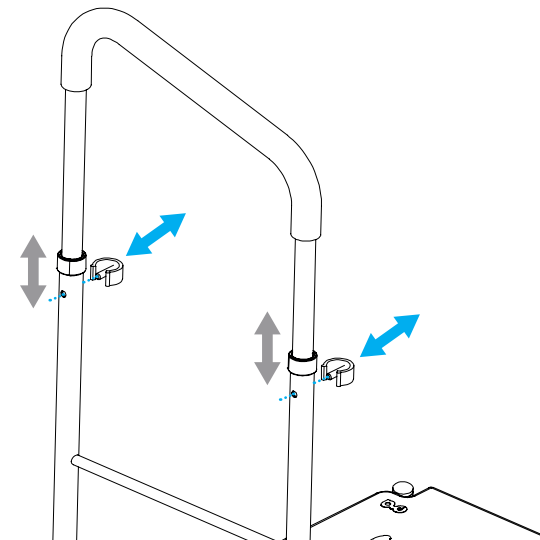



СТИЛНА И БЕЗОПАСНА СЪПКА, КОЯТО РАЗШИРЯВА ДОСТЪПА ВИ ВЪВ ВСЯКА СТАЯ НА ДОМА. УСТОЙЧИВИТЕ НА ПРИПЛЪЗВАНЕ ФУНКЦИИ ОСИГУРЯВАТ БЕЗОПАСНА ПЛАТФОРМА ЗА СТОЕНЕ, ДОКАТО ДОБАВЯНЕТО НА ДРЪЖКА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ УВЕЛИЧИ СТАБИЛНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА/ПОТРЕБИТЕЛЯ Е ДА ИЗВЪРШВА ПЪРВОНАЧАЛНА И РЕДОВНА ОЦЕНКА НА РИСКА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЪПКАЛОТО Е СУХО И БЕЗ САПУН ИЛИ МАСЛЕН ФИЛМ. ДРЪЖКАТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ОПОРА - НЕ ЗА НОСЕНЕ НА ТЕЖЕСТИ. ПРОВЕРКА ЗА СТАБИЛНОСТ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ЗАСТАНЕТЕ ЦЕНТРАЛНО НА ПОВЪРХНОСТТА НА СЪПКАЛОТО. ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗАТЯГАНЕТО НА ФИКСАТОРИТЕ НА ДРЪЖКАТА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ С ДРУГИ СЪПКАЛА. ПОЗВОЛВАЙТЕ НА ДЕЦА И МАЛКИ ДЕЦА ДА ИЗПОЛЗВАТ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕ. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ ДРЪЖКАТА - ТОВА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ПРЕОБРЪЩАНЕ.

⚖ = МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
▲ = ИЗБЪРШЕТЕ С НЕАБРАЗИВНА КЪРПА И САПУНЕНА ВОДА.

ВСЕКИ СЕРИОЗЕН ИНЦИДЕНТ, ВЪЗНИКНАЛ ПРИ УПОТРЕБА, ТРЯБА ДА БЪДЕ ДОКЛАДАН НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕК (КЛИЕНТИ ОТ ЕС) ИЛИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.



EIN STILVOLLER UND SICHERER SCHRITT, DER IHRE REICHWEITE IN JEDEM RAUM DES HAUSES ERHÖHT. RUTSCHHEMMENDE EIGENSCHAFTEN BIETEN EINE SICHERE PLATTFORM ZUM STEHEN, WÄHREND DER ZUSÄTZLICHE GRIFF DIE BENUTZERSTABILITÄT WEITER ERHÖHT. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS/BENUTZERS, EINE ERSTE UND REGELMÄßIGE RISIKOBEWERTUNG DURCHZUFÜHREN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE STUFE TROCKEN UND FREI VON SEIFEN- ODER ÖLFILM IST. DER GRIFF DIEN T NUR ZUR UNTERSTÜTZUNG - NICHT ZUR BELASTUNG. VOR GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN. STEHEN MITTIG AUF DER TRITTFLÄCHE. ÜBERPRÜFEN SIE DIE GRIFFBEFESTIGUNGEN REGELMÄßIG AUF FESTEN SITZ. NICHT MIT ANDEREN SCHRITTEN VERWENDEN. KINDER UND KLEINKINDER NUR UNTER AUFSICHT BENUTZEN LASSEN. ÜBERLASTEN SIE DEN GRIFF NICHT – DIES KANN ZUM UMKIPPEN FÜHREN.

⚖ = MAXIMALES BENUTZERGEWICHT.
▲ = MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENLAUGE ABWISCHEN.

JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DIE VERWENDUNG AUFTRIT, SOLLTE DEM EG-VERTRETER (EU-KUNDEN) ODER DEM HERSTELLER GEMELDET WERDEN.



STYLŮVÝ A BEZPEČNÝ KROK, KTERÝ ROZŠÍŘÍ VÁŠ DOSAH V JAKÉKOLI MÍSTNOSTI DOMOVA. PROTISKLUZOVÉ PRVKY POSKYTJÍ BEZPEČNOU PLATFORMU PRO STÁNÍ, ZATÍMCO PŘIDÁNÍ RUKOJETI DÁLĚ ZVÝŠÍ STABILITU UŽIVATELE, JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA/UŽIVATELE PROVÁDĚT POČÁTEČNÍ A PRAVIDELNÁ HODNOCENÍ RIZIK. UJISTĚTE SE, ŽE JE SCHOD SUCHÝ A BEZ MÝDLOVÉHO NEBO OLEJOVÉHO FILMU. RUKOJETĚ JE URČENA POUZE PRO PODEPŘENÍ - NE PRO NOSNÉ ZATÍŽENÍ. ZKONTROLOVAT STABILITA PŘED POUŽITÍM. POUŠTAVTE SE CENTRÁLNĚ NA NÁŠLAPNOU PLOCHU. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE UTAŽENÍ ÚCHYTŮ RUKOJETI. NEPOUŽÍVEJTE S JINÝMI KROKY. DOVOLTE DĚTEM A BATOLATŮM POUŽÍVAT POUZE POD DOHLEDEM. NEPŘETĚŽUJTE RUKOJETĚ – MOHLO BY DOJÍT K PŘEVŘÁCENÍ.

⚖ = MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.
▲ = OTĚŘETE NEABRAZIVNÍM HADRÍKEM A MÝDLOVOU VODOU.

JAKÁKOLI VÁŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE PŘI POUŽÍVÁNÍ, BY MĚLA BÝT HLÁŠENA EC REP (ZÁKAZNÍCI V EU) NEBO VÝROBCI.



UNE ÉTAPE ÉLÉGANTE ET SÛRE, QUI ÉTEND VOTRE PORTÉE DANS N'IMPORTE QUELLE PIÈCE DE LA MAISON. LES CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES OFFRENT UNE PLATE-FORME SÛRE SUR LAQUELLE SE TENIR DEBOUT TANDIS QUE L'AJOUT DE LA POIGNÉE AUGMENTERA ENCORE LA STABILITÉ DE L'UTILISATEUR. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE/UTILISATEUR D'EFFECTUER UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES. ASSUREZ-VOUS QUE LA MARCHÉ EST SÈCHE ET EXEMPT DE SAVON OU DE FILM D'HUILE. POIGNÉE À UTILISER UNIQUEMENT POUR LE SUPPORT - PAS DE POIDS. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT UTILISATION. SE TENIR AU CENTRE DE LA SURFACE DE LA MARCHÉ. VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT LE SERRAGE DES FIXATIONS DE LA POIGNÉE. NE PAS UTILISER AVEC D'AUTRES ÉTAPES. AUTORISEZ UNIQUEMENT LES ENFANTS ET LES TOUT-PETITS À UTILISER SOUS SURVEILLANCE. NE SURCHARGEZ PAS LA POIGNÉE - CELA PEUT PROVOQUER UN BASCULEMENT.

⚖ = POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR.
▲ = ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.

TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU REPRÉSENTANT CE (CLIENTS EUROPÉENS) OU AU FABRICANT.



Produit soumis à une règle de tri

Triman - Indicate recycling and sorting rules (only relevant for France)

